

MAXISTEAM

URZĄDZENIE DO MYCIA NARZĘDZI PARĄ WODNĄ

Wysokowydajne urządzenie do mycia parą pod ciśnieniem MAXISTEAM zapewnia skuteczne, wymycie przyrządów medycznych bez używania środków chemicznych. Użycie pary sprężonej do wartości 4 barów myje intensywnie nawet trudne do wyczyszczenia elementy narzędzi takie jak: połączenia, ząbkowania, zawiasy, kanały itp.

Urządzenie mimo wytwarzania wysokiego ciśnienia i temperatury jest bezpieczne dla personelu i intuicyjne w obsłudze.

- Pracuje po podłączeniu do sieci 230 V.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Nie wymaga podłączenia do instalacji wodnej.
- Jednorazowe napełnienie zbiornika wodą demineralizowaną wystarcza do długotrwałej pracy ze stałą dostępnością pary.

Zastosowanie sprężonej pary w połączeniu ze **specjalnymi opatentowanymi szczotkami Entrhal** wspomagającymi mycie parą pod ciśnieniem gwarantuje, że nawet najtrwalsze zabrudzenia zagnieżdżone w najtrudniej dostępnych miejscach zostaną usunięte.



nr kat. **8800554-1**

DANE TECHNICZNE	
MOC	1100 W
WYMIARY	280 x 330 x 370 mm
TEMPERATURA	150 °C
TOLERANCJA CZUŁOŚCI	1%
CIŚNIENIE	4 bary
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	3,5 l – manualne napełnianie




STERIGAT

Nasza Pasja To Twój Sukces!

Użycie szczotki o właściwej średnicy, zamocowanej na giętkiej lancie o odpowiedniej długości umożliwia dotarcie do zabrudzeń umieszczonych nawet w długim, bardzo wąskim, kanale i ich skuteczne usunięcie. Wszystkie szczotki i lance giętkie są wyposażone w końcówki typu Luer-Lock co pozwala je łatwo podłączyć do dowolnego modelu myjni - dezynfektora i po skończonej pracy zapewnić im ponowną czystość.



Komplet do mycia powierzchni wewnętrznych składa się z giętkich lanc o trzech różnych długościach 15, 25 i 50 cm, na których mocuje się specjalne szczotki przystosowane do mycia kanałów o dowolnie małych średnicach.

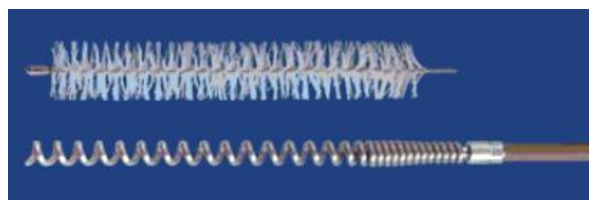

ŚREDNICA KANALU [mm]	Lanca 15 cm + 1 szczotka	Lanca 25 cm + 1 szczotka	Lanca 50 cm + 1 szczotka	ZAPAS SZCZOTEK [opak. 3 szt., odpowiednie do każdej długości lancy]
3 – 4	E.LT610-15-S	E.LT610-25-S	E.LT610-50-S	E.LT610-S-00
4 – 5	E.LT620-15-S	E.LT620-25-S	E.LT620-50-S	E.LT620-S-00
6 – 8	E.LT635-15-S	E.LT635-25-S	E.LT635-50-S	E.LT635-S-00
10 – 13	E.LT655-15-S	E.LT655-25-S	E.LT655-50-S	E.LT655-S-00

Uzupełnieniem kompletu jest szczotka o średnicy 20 mm przystosowana do mycia sprężoną parą skomplikowanych powierzchni zewnętrznych. **Nr kat. E.LT581-S**



Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa

+48 22 3797160

sterigat@sterigat.pl

www.sterigat.pl