

# STERIGAT

Nasza Pasja To Twój Sukces!

## MULTISTEAM

URZĄDZENIE DO MYCIA NARZĘDZI PARĄ WODNĄ  
LUB SPRĘŻONYM POWIETRZEM

Wysokowydajne urządzenie do mycia parą pod ciśnieniem zapewnia skuteczne, wymycie przyrządów medycznych bez używania środków chemicznych. Użycie pary sprężonej do wartości 6 barów myje intensywnie nawet trudne do wyczyszczenia elementy narzędzi takie jak spoiny.

Dzięki wielofunkcyjnemu pistoletowi można używać do czyszczenia instrumentów: gorącej pary o ciśnieniu 6 barów, mokrej pary, gorącej wody lub sprężonego powietrza.

Urządzenie dostępne jest również z automatycznym napełnianiem zbiornika wody – AUTOSTEAM (nr kat. E.8800701).

Zastosowanie sprężonej pary w połączeniu **ze specjalnymi opatentowanymi szczotkami Entrhal** wspomagającymi mycie parą pod ciśnieniem gwarantuje, że nawet najtrwalsze zabrudzenia zagnieżdżone w najtrudniej dostępnych miejscach zostaną usunięte.



nr kat. **E.8800681**

DANE TECHNICZNE	
MOC	2500 W
WYMIARY [wys. x szer. x głęb.]	420 x 300 x 350 mm
TEMPERATURA	160 °C
CIŚNIENIE	Regulacja w zakresie 0-6 barów
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	5 l – manualne napełnianie
WAGA	14 kg
ZASILANIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM	maks. 4 bary

**Sterigat Sp. z o.o.**  
Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa

+48 22 3797160  
sterigat@sterigat.pl  
www.sterigat.pl


# STERIGAT

Nasza Pasja To Twój Sukces!

Użycie szczotki o właściwej średnicy, zamocowanej na giętkiej lancy o odpowiedniej długości umożliwia dotarcie do zabrudzeń umieszczonych nawet w długim, bardzo wąskim, kanale i ich skuteczne usunięcie. Wszystkie szczotki i lance giętkie są wyposażone w końcówki typu Luer-Lock co pozwala je łatwo podłączyć do dowolnego modelu myjni - dezynfektora i po skończonej pracy zapewnić im ponowną czystość.



Komplet do mycia powierzchni wewnętrznych składa się z giętkich lanc o trzech różnych długościach 15, 25 i 50 cm, na których mocuje się specjalne szczotki przystosowane do mycia kanałów o dowolnie małych średnicach.

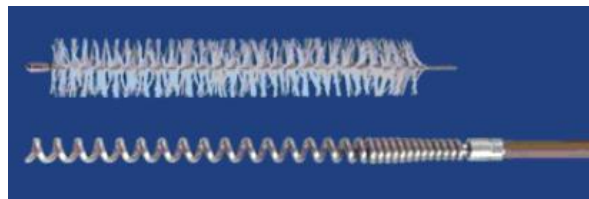

ŚREDNICA KANAŁU [mm]	Lanca 15 cm + 1 szczotka	Lanca 25 cm + 1 szczotka	Lanca 50 cm + 1 szczotka	ZAPAS SZCZOTEK [opak. 3 szt., odpowiednie do każdej długości lancy]
3 – 4	E.LT610-15-S	E.LT610-25-S	E.LT610-50-S	E.LT610-S-00
4 – 5	E.LT620-15-S	E.LT620-25-S	E.LT620-50-S	E.LT620-S-00
6 – 8	E.LT635-15-S	E.LT635-25-S	E.LT635-50-S	E.LT635-S-00
10 – 13	E.LT655-15-S	E.LT655-25-S	E.LT655-50-S	E.LT655-S-00

Uzupełnieniem kompletu jest szczotka o średnicy 20 mm przystosowana do mycia sprężoną parą skomplikowanych powierzchni zewnętrznych. Nr kat. E.LT581-S



Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa

+48 22 3797160

sterigat@sterigat.pl

www.sterigat.pl