



# Getinge 9100E

## Myjnia-dezynfektor wózków

Bezpieczne, wydajne i trwałe  
rozwiązanie do mycia



# Spokój umysłu

## Skuteczne czyszczenie i niezawodność

Znakomite osiągi dzięki wysokiej wydajności

Ludzie ufają, że szpital zapewni członkom ich rodziny bezpieczną i skuteczną opiekę. Osoby chore, starsze i osłabione są bardziej podatne na zakaźne patogeny. Dlatego profilaktyka zakażeń jest tak ważnym elementem hospitalizacji.

### **Jesteśmy Twoim partnerem w kontroli zakażeń**

Myjnia-dezynfektor Getinge 9100E o energooszczędnej konstrukcji zabezpieczy Twoje potrzeby uzyskania wysokiej wydajności.

Możesz mieć pewność, że Getinge 9100E zapewni niezawodne czyszczenie, które pozwoli uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego i zapewni bezpieczeństwo pacjentów.

# Zwiększ wydajność dzięki 9100E

## Oszczędzaj czas, energię i detergenty bez utraty jakości

Myjnia-dezynfektor do wózków Getinge 9100E umożliwia wybór różnych trybów działania: standardowy lub oszczędny (dotyczy zużycia wody i detergentów). Tryb oszczędny ogranicza zużycie wody, detergentów i energii, zapewniając bardziej ekonomiczną eksploatację.


### Chroń środowisko, opiekując się pacjentami

Myjnia-dezynfektor 9100E ma zbiorniki procesowe, które przechowują podgrzaną wodę z poprzednich cykli mycia. W trybie ekonomicznym ciepła woda jest używana ponownie, co zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło i detergent w kolejnych cyklach. W ten sposób można nie tylko zmniejszyć zużycie wody, energii i detergentu, ale również skrócić czas procesu do zaledwie 10 minut.

- W każdym trybie do czyszczenia używane są te same dysze rozpylające o dużej mocy
- Ponowne wykorzystanie wody z poprzednich cykli mycia pozwala zmniejszyć zużycie detergentów.
- Ponowne wykorzystanie ciepłej wody zmniejsza zapotrzebowanie na ogrzewanie i minimalizuje zużycie energii

Zwiększona przepustowość i obniżone koszty operacyjne zapewniają maksymalny zwrot z inwestycji.

### Mniejsze zużycie mediów

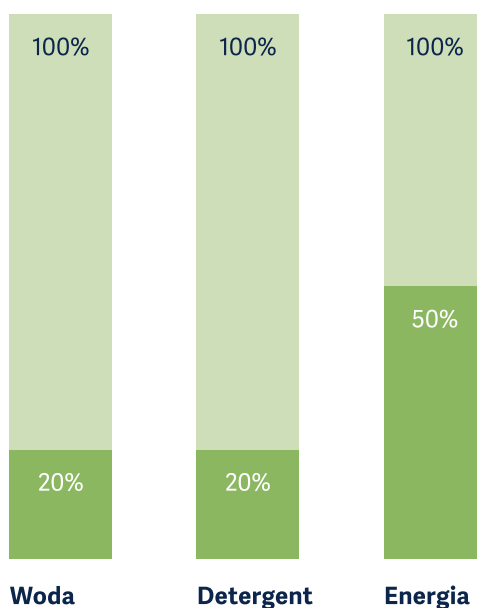

Standard Tryb efektywności\*

\* Maksymalna redukcja zużycia energii dzięki zastosowaniu technologii ponownego wykorzystania 9100E

GETINGE ✱

GETINGE ✱



# Najnowocześniejsza technologia


Nasi projektanci przemysłowi współpracują ze szpitalami, aby sprostać rzeczywistym wyzwaniom dotyczącym mycia. Getinge 9100E łączy w sobie dobre wzornictwo i inteligentne rozwiązania, aby zapewnić najwyższy poziom czyszczenia i wydajności.

- Energooszczędny wymiennik ciepła, automatyczna przepustnica wywiewu oraz wentylator z regulacją prędkości obrotowej poprawiają ogólną wydajność pracy, przyczyniając się do mniejszego zużycia energii.



## Skuteczne czyszczenie

Do 128 dysz natryskowych na pionowym kolektorze oscylacyjnym kieruje strumień wody o dużej mocy na każdy wsad, zapewniając optymalny zasięg i czyszczenie. Do ich demontażu do czyszczenia nie są potrzebne żadne narzędzia.

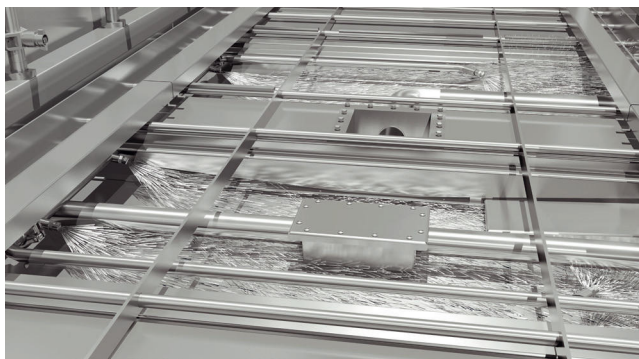

## Automatyczny system czyszczenia odpływu

Oddzielny i niezależny system dysz natryskowych automatycznie splotkuje i czyści odpływ bez konieczności podnoszenia podłogi komory.

- 9100E spełnia najsurowsze wymagania dot. higieny
- Gładkie powierzchnie i kąt pochylenia umożliwiają całkowite opróżnienie systemu rur i komory, eliminując ryzyko przeniesienia pozostałości i zanieczyszczeń do następnego procesu
- Wizualna kontrola wsadu dzięki przeszklonym drzwiom View in Process (VIP), które są standardem dla wszystkich modeli
- Technologia redukcji hałasu dla poprawy środowiska pracy



## Ulepszona bariera powietrzna

Do utrzymania różnicy ciśnień pomiędzy strefami (strona załadunku i rozładunku) wymagana jest mniejsza wydajność wentylacji budynku.



## Dzielone dokowanie

Automatyczny system dokowania dostosowuje się do uniwersalnych wózków wsadowych z wbudowanym ramieniem natryskowym.


# Intuicyjne i inteligentne działanie

Ciesz się wysoką produktywnością, szybkim tempem i wydajnością pracy dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika Centric. Intuicyjny interfejs pomaga operatorom w wizualizacji i monitorowaniu programów.


- Wyświetlaj pozostały czas trwania procesu i opcje uruchamiania, ułożone w czytelny i logiczny sposób
- Intuicyjne oprogramowanie zmniejsza czas oczekiwania
- Jednoznaczne instrukcje zmniejszają ryzyko błędu człowieka
- Duże kolorowe ekrany 10" o wysokiej rozdzielczości są czytelne nawet z dużej odległości




**Czytelny podgląd statusu**

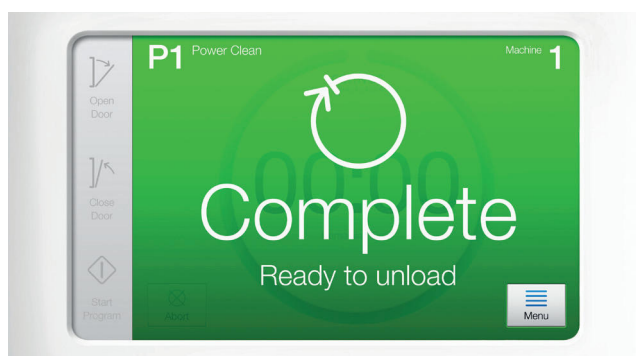

**Czytelny ekran z intuicyjnym układem**

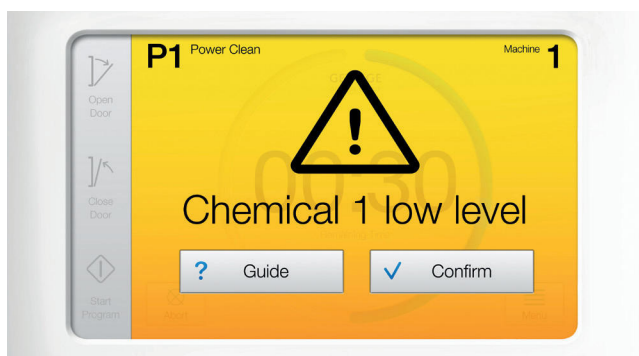

**Komunikat ostrzegawczy towarzyszący zmianie kolorów**

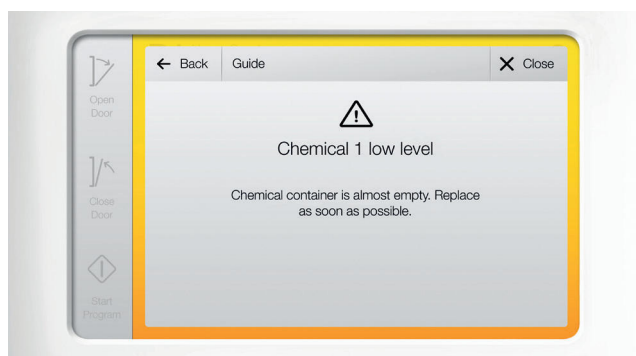

**Wskazówki ekranowe**



# Rozmiar dostosowany do zadania

Sześć wielkości komór dostosowanych do indywidualnych potrzeb

## Mylnia, która spełni Twoje potrzeby


Wszystkie mylnie-dezynfekторы wózków Getinge 9100E mają te same części i funkcje. Mogą się różnić tylko wielkością komory. Pomożemy Ci ocenić, co byłoby najlepszym rozwiązaniem dla Twojego ośrodka.

- Wszystkie modele są dostępne w wersji nieprzelotowej lub przelotowej, aby pasowały do wybranej przestrzeni
- Dwa z sześciu modeli są wyposażone w szeroki otwór (EW), aby pomieścić większe produkty; jeden z nich jest także wyższy
- Wszystkie modele zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić użytkownikom ergonomiczne środowisko pracy




### 9120E

---

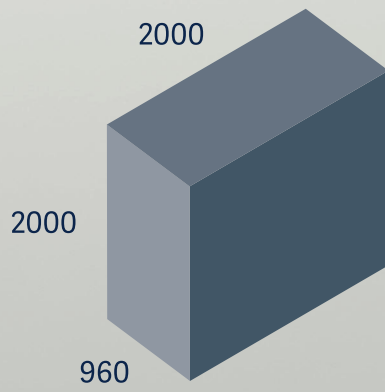


### 9125E

---

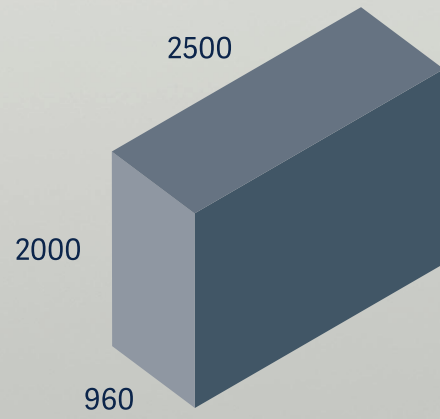


### 9127E

---

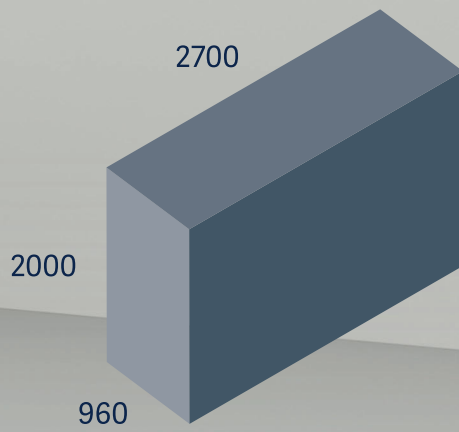


### 9128E

---

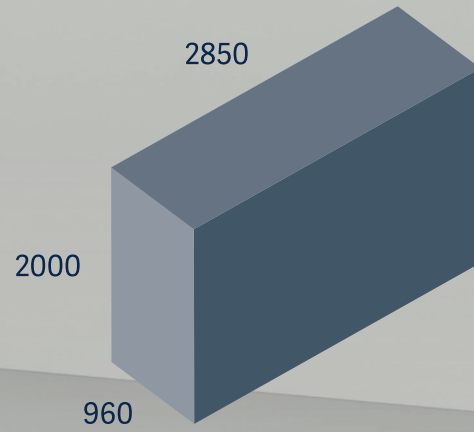


### 9128EW

---

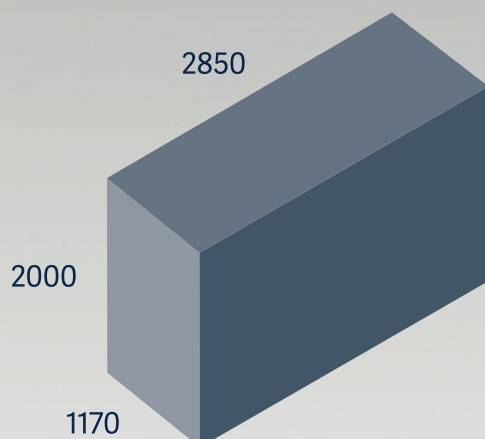

### 9122EW

---

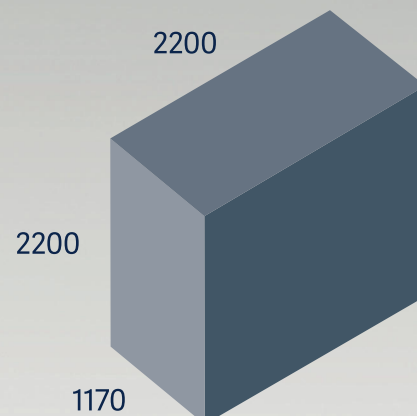

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach


# Wózek wsadowy

— do wszystkich potrzeb

Trzy rozmiary wózków wsadowych (do przewożenia wsadu) pozwalają zmaksymalizować liczbę czyszczonych elementów w jednym wsadzie. Zapewniają doskonałe czyszczenie i wysoką przepustowość oraz są ergonomicznie zaawansowane.

Wózki 700, 1300 i 2000 mm można łączyć na różne sposoby we wszystkich sześciu modelach 9100E.

Uniwersalne wózki wsadowe z wbudowanymi ramionami natryskowymi są dostępne w rozmiarach 1300 i 2000.

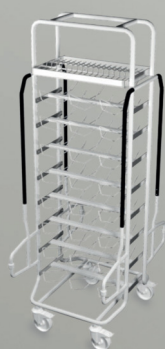

700




1300




2000


## Przykłady załadunku wózków wsadowych do modelu 9128E

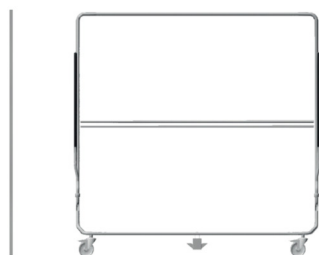

Wózek wsadowy  
1 x 2000 mm z wbudowanymi  
ramionami natryskowymi

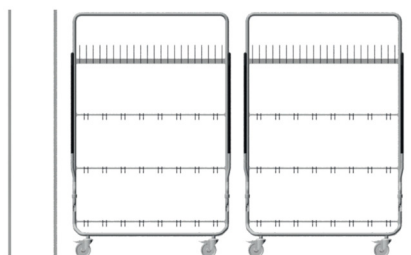

Wózki wsadowe 2x 1300 mm

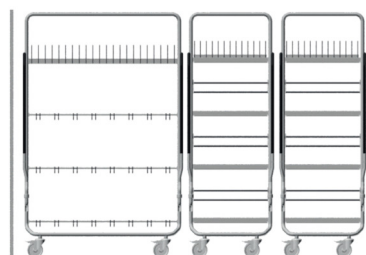

Wózki wsadowe  
1x 1300 mm i 2x 700 mm



GETINGE



# Żadne wyzwanie nie jest zbyt duże

Wyczyścimy nawet produkty o niestandardowych wymiarach

Korzystając z myjni-dezynfektora Getinge 9100E, można bezpiecznie czyścić małe i duże przedmioty, używając wózków wsadowych lub nie.



Pojemniki i pokrywy



Wózki transportowe



Buty



Stoły operacyjne



Narzędzia



Łóżka i sprzęt z wypożyczalni, w tym wózki inwalidzkie i środki higieny osobistej

# T-DOC: Następny krok w identyfikowalności

## Dzięki Getinge Online jesteś zawsze w kontakcie

### Optymalizacja obiegu

T-DOC to wiodące w skali światowej rozwiązanie firmy Getinge do zarządzania obiegiem artykułów sterylnych, które spełnia wymagania działów sterylizacji o różnych wielkościach.

Dzięki pełnej identyfikowalności narzędzi, T-DOC zapewnia dostarczenie odpowiedniego produktu właściwemu pacjentowi, we właściwym czasie i miejscu.

T-DOC optymalizuje obieg artykułów w sterylizatorni centralnej, umożliwiając planowanie produkcji zgodnie z harmonogramem operacji.



### Bądź na bieżąco 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu

Getinge Online to unikalna, szyfrowana usługa zdalna, która umożliwia dostęp do informacji z urządzeń za pośrednictwem komputerów, tabletów i smartfonów połączonych z Internetem.

To bezpieczne połączenie umożliwia przesyłanie bieżących i historycznych danych dotyczących wydajności, powiadomień o usterkach oraz wskazówek, jak krok po kroku rozwiązać problemy.

Dostępne dane optymalizują procedury pracy i skracają czas przestoju.



# Dbaj o bezpieczeństwo

– używaj materiałów eksploatacyjnych Getinge

Oferta Getinge obejmuje nie tylko urządzenia, ale również materiały eksploatacyjne potrzebne do utrzymania wysokiej wydajności i bezpieczeństwa.

## Detergenty Getinge Clean

Getinge Clean to kompletna oferta detergentów, które zapewniają maksymalną wydajność pracy i wysokie oszczędności. Nasze detergenty zostały opracowane, przetestowane i zwalidowane w myjniach-dezynfektorach Getinge pod kątem zgodności z EN ISO 15883. Kolorowe symbole oznaczają, kiedy i gdzie należy stosować każdy detergent, aby uzyskać pełne bezpieczeństwo.

## Pozwól, aby system Getinge CMS wykonywał pracę za Ciebie

Zamówienia Twojego działu na detergenty mogą być realizowane z jednego źródła: z Getinge Clean Management System czyli CMS. Jest to elastyczny system, który eliminuje konieczność częstej ręcznej wymiany małych pojemników i umożliwia dostosowanie konfiguracji do indywidualnych potrzeb działu. Może także służyć do monitorowania statusu oraz przesyłania alarmów i ostrzeżeń.

## Getinge Assured

Najlepszym sposobem na sprawdzenie czystości jest rzetelna procedura testowa, która obejmuje monitorowanie płukania, kontrolę zabrudzeń i kontrolę pozostałości zanieczyszczeń białkowych. Produkty Getinge Assured Wash Monitoring monitorują wszystkie fazy procesu mycia i zapewniają niezależną weryfikację skuteczności i powtarzalności procesu czyszczenia. Zostały opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z wymaganiami normy EN ISO 15883.



# Getinge Care

## Naszą misją jest opieka

Umowa serwisowa Getinge Care maksymalizuje długoterminową wartość inwestycji. Produkty Getinge będą monitorowane i konserwowane w celu zapewnienia najwyższej wydajności, wszędzie tam i zawsze gdy są potrzebne.

### **Jesteś naszym priorytetem**

Maksymalizacja wydajności urządzeń nie musi przekraczać Twojego budżetu. Opracowaliśmy cztery różne poziomy pakietów serwisowych z myślą o różnych szpitalach. Spełnimy Twoje potrzeby niezależnie od tego, czy w ośrodku funkcjonuje pełny oddział sterylizatorni centralnej, czy też liczba pracowników jest ograniczona.

Terenowi przedstawiciele serwisowi z certyfikatem Getinge oraz oryginalne części Getinge to najlepsza inwestycja, która pozwoli wydłużyć żywotność urządzeń.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Getinge Care, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Getinge.





Getinge to globalny dostawca innowacyjnych rozwiązań do sal operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii, działów sterylizacji oraz dla firm i instytucji zajmujących się nauką i przemysłem. Dzięki naszemu doświadczeniu i bliskiej współpracy z ekspertami ds. organizacji służby zdrowia, medycyny i technologii medycznej poprawiamy standard życia ludzi dzisiaj i jutro.

**Getinge Infection Control AB** · P. O. Box 69 · SE-305 05 Getinge · Sweden · Phone: +46 (0) 10 335 00 00 · [info@getinge.com](mailto:info@getinge.com)

**[www.getinge.com](http://www.getinge.com)**