


WSKAŹNIK WIELU ZMIENNYCH – TYP 4 STERYLIZACJA PLAZMOWA - GETINGE ASSURED

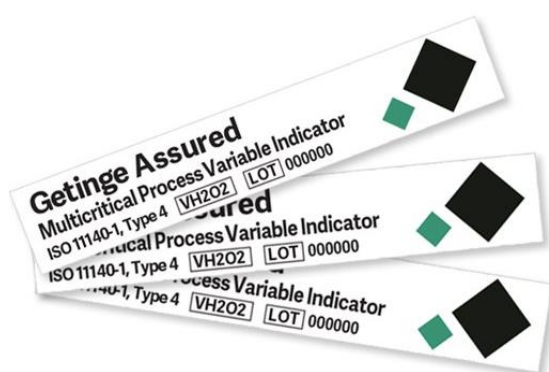

nr kat. **G.6005500509**
Opak. 250 szt.

- **OPIS:**
Zaprojektowany do monitorowania procesów sterylizacji plazmowej lub parami nadtlenu wodoru. Reaguje na krytyczne zmienne procesu; czas, temperatura i stężenie nadtlenu wodoru. Nie zawiera ołowiu i toksycznych metali ciężkich.
- **NORMA:**
PN-EN ISO 11140-1:2015
(Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki chemiczne -- Część 1: Wymagania ogólne).
- **WYNIKI I PRZECHOWYWANIE:**
Po wystawieniu na działanie VH_2O_2 substancja wskaźnikowa zmienia barwę z czarnej na zieloną.
Przechowywać w dostarczonym opakowaniu w temp. 10 – 38 °C, wilgotność względna 10 – 60 %. Trzymać z dala od światła, nie wystawiać na działanie ciepła.
Okres przydatności do użycia na opakowaniu.