


WSKAŹNIK ZINTEGROWANY - TYP 5

STERYLIZACJA TLENKIEM ETYLENU - STERIKING®

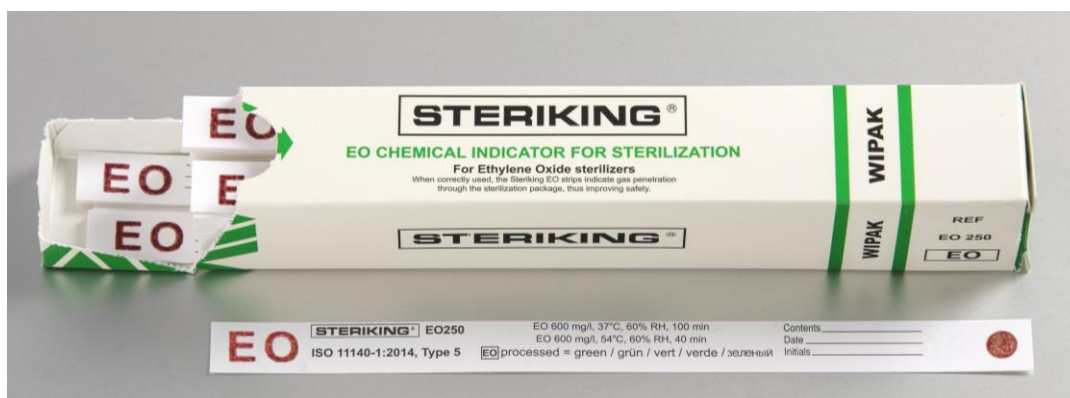

- **OPIS:**
Wskaźnik chemiczny Steriking® do stosowania w każdym pakiecie ładunku sterylizatora.
Ekspozycja na tlenek etylenu w cyklu sterylizacyjnym o parametrach:
37°C, 600 mg/l EO, 60% wilgotność względna (RH) przez 100 minut lub 54°C, 600 mg/l EO, 60% wilgotność względna (RH) przez 40 minut.
- **NORMA:**
PN-EN ISO 11140-1:2015
(Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki chemiczne -- Część 1: Wymagania ogólne).
- **WYNIKI I PRZECHOWYWANIE:**
Po ekspozycji na tlenek etylenu następuje wyraźna zmiana barwy substancji wskaźnikowej z ciemnoczerwonej na zieloną.

Nie obowiązują żadne specjalne środki bezpieczeństwa, jakie należy zachować przy przechowywaniu wskaźników STERIKING®. Nie należy jednak wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nadmiernej wilgotności. Okres przydatności do użycia na opakowaniu.

nr kat. **W.EO250**
Opak. 250 szt.