

TR.CDWA4

Wskaźnik kontroli procesu mycia w myjniach-dezynfektorach i myjniach ultradźwiękowych

Wskaźnik do rutynowej kontroli procesu mycia w myjniach-dezynfektorach oraz myjniach ultradźwiękowych, które działają z częstotliwościami równymi lub większymi niż 35 kHz, w temperaturach od 30 °C do 70 °C.


- **Norma:**
Zgodny z wymogami EN ISO 15883-5.
- **Nr katalogowy:**
TR.CDWA4
- **Opakowanie:**
200 szt.
- **Interpretacja wyników:**



Nie poddany procesowi

Wynik nieprawidłowy

Wynik prawidłowy

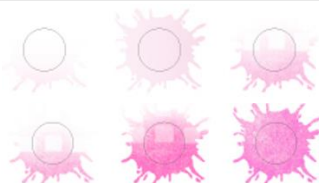

- **Wyniki i przechowywanie:**

Wskaźnik sprawdza skuteczność mycia poprzez usunięcie całego zabrudzenia testowego.

Przechowywać w dostarczonym opakowaniu w temp. 10 – 30 °C, wilgotność względna 30 – 80 %. Trzymać z dala od światła. Nie dotykać atramentu wskaźnika. Okres przydatności do użycia na opakowaniu.

Uchwyt do wskaźnika

Nr kat. TR.CDWAH



Uchwyt ze stali nierdzewnej mocowany do tacy. Konstrukcja uchwytu utrudnia dostęp detergentu do umieszczonego wskaźnika.

Uchwyt może być również stosowany ze wskaźnikami dezynfekcji termicznej TR.IT27W.

Sterigat Sp. z o.o.

Biurowo handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl