


## WSKAŹNIK WIELU ZMIENNYCH - TYP 4 STERYLIZACJA PARĄ WODNĄ - STERIKING®

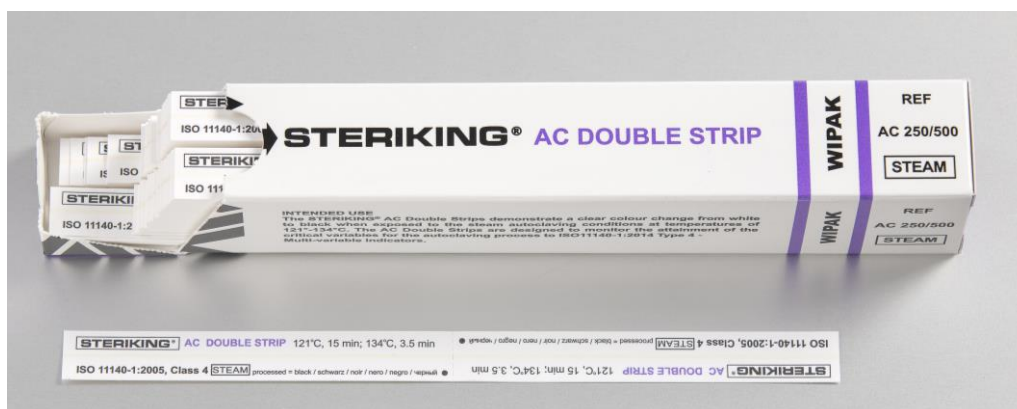

- **OPIS:**  
Wskaźnik chemiczny Steriking® do stosowania w każdym pakiecie załadunku sterylizatora, w których czas ekspozycji w temperaturze 134 °C wynosi 3,5 minuty, w temperaturze 121 °C wynosi 15 minut.  
Podwójny pasek ze wskaźnikiem sterylizacji parowej ma perforację, co umożliwi podzielenie go na dwa testy.
- **NORMA:**  
PN-EN ISO 11140-1:2015  
(Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki chemiczne -- Część 1: Wymagania ogólne).

nr kat. **W.AC 250/500**  
Opak. 500 szt./250 podwójnych pasków

- **WYNIKI I PRZECHOWYWANIE:**  
Wyraźna zmiana barwy substancji wskaźnikowej z białej na czarną po osiągnięciu parametrów procesu.

Nie obowiązują żadne specjalne środki bezpieczeństwa, jakie należy zachować przy przechowywaniu wskaźników STERIKING®. Nie należy jednak wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nadmiernej wilgotności. Okres przydatności do użycia na opakowaniu.